


今、「早朝高血圧」が 注目されています。

脳卒中や
心筋梗塞は
朝多い

脳卒中や心筋梗塞は、朝方に起こることが多いのをご存じですか。一般に血圧は夜間から、朝方にかけて上昇しますが、朝方の血圧が特に高い場合を「早朝高血圧」といいます。また、起床後と就寝前の血圧の差が大きい場合、脳卒中のリスクが2倍以上になると言われています。

早朝高血圧のタイプ

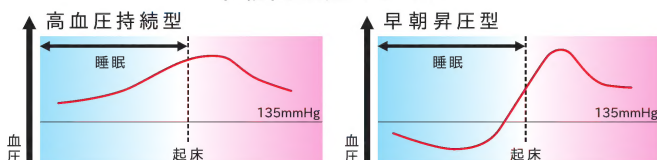

家庭血圧で

135/85mmHg 以上は高血圧。*

とくに起床後の血圧が135/85mmHg以上の場合を早朝高血圧といいます。

※ 出典：日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2004年度版

「早朝高血圧」
の確認は、
家庭での毎日の
測定から

高血圧症で降圧薬を服用している患者さんの約半数に「早朝高血圧」が認められたという研究データもあります。医師が起床後の血圧に注目するのは、そのためです。家庭での毎日の測定が、診断・治療の役に立つのです。

主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロンデジタル自動血圧計HEM-1010 ●一般の名称…自動電子血圧計 ●医療機器分類…管理医療機器 ●表示方式…デジタル表示方式 ●測定方式…オシロメトリック法 ●測定範囲…圧力/0～299mmHg、脈拍数/40～180拍毎分 ●測定精度…圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内 ●加圧…自動加圧方式(ファジィコントロール) ●減圧…アクティブ電子制御方式 ●排気…自動急速排気方式 ●圧力検出…静電容量式圧力センサー ●電源…単3形アルカリ乾電池(4本)、専用ACアダプタ(AC100V) ●電池寿命…約250回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、1日6回170mmHg加圧の場合) ●使用環境温湿度…+10～+40℃・30～85%RH ●対象腕周…17～32cm ●本体質量…約1600g(電池含まず) ●外形寸法…幅230×高さ217×奥行き228mm ●付属品…お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4本)、専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き) ●医療機器認証番号…218AGBZX00030000

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行き) 質量	243×257×239mm (約2.2kg)	—	505×281×497mm (約12.0kg)4台/ケース



4 975479 605147

安全に関するご注意

- 測定結果の自己判断、治療は危険です。必ず医師の指導にしてください。
- ◎自己判断は、病気の悪化につながる場合があります。
- お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
- 安全にお使いいただくため、ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ／別売品・消耗部品のお求めは
オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く月～金)9:00～19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料 0120-30-6606
通話料無料 FAX 0120-10-1625

製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社
〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>
DA177 ©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2006, All Rights Reserved.

OMRON

オムロン デジタル自動血圧計
HEM-1010 上腕式 早朝高血圧確認機能▲
スポットアーム



A Good Sense of Health


腕を入れるだけで、
正確に測定できる姿勢に。
▲マークが「早朝高血圧」の
確認に役立ちます。




オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1010 上腕式 早朝高血圧確認機能▲ スポットアーム

オープン価格

腕を入れるだけで
正しい測定姿勢を
つくる可動式腕帯

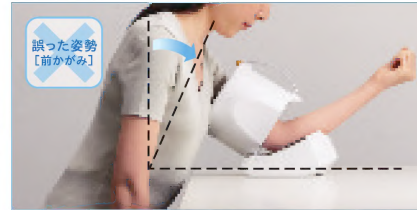

姿勢

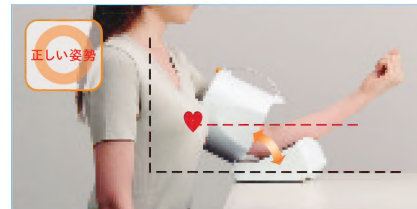

角度が自由に動く可動式腕帯が、前かがみになりがちな測定姿勢を正し、腹圧による血圧の上昇を防ぎます。また、ひじ置きがあるので、腕の力を抜いた楽な姿勢で測定位置を安定させます。不適切な姿勢の場合は「姿勢」マークでお知らせします。

▲マーク点灯で
「早朝高血圧」を
確認



- 朝と夜に測定した血圧値を個別に記録、管理。朝・夜それぞれの週平均の値が「135/85mmHg」をこえた場合に、「朝平均」「夜平均」マークが点滅し、高血圧のめやすをお知らせします。
- さらに朝の平均値が「135/85mmHg」をこえた場合には「早朝高血圧」マークが点灯し、「早朝高血圧」の確認に役立ちます。

※「家庭血圧測定の指針」では、家庭で測定した場合の高血圧は135/85mmHg以上となっています。
※朝の血圧はAM4:00～AM10:00 夜の血圧はPM7:00～AM2:00

「体動」マークが
測定ミスをお知らせ

測定中に体を動かすと、正しい血圧値を得ることができません。測定ミスがあった場合は「体動」マークでお知らせし、再測定を促します。

体動

使いやすさに
こだわった
大型液晶と
操作スイッチ

- バックライト*付き大型液晶
最高/最低血圧値・脈拍数を見やすい角度で同時に表示。
※ACアダプタ使用時に点灯。

- 早朝高血圧マーク
朝の測定値の週平均が「高血圧の基準値以上」(135/85mmHg以上)のときに点灯。

- 記録呼出スイッチ
84回分の測定値と、最新より過去3回分の平均測定値を表示。

- 週平均スイッチ
8週間分の朝と夜の週平均値をそれぞれ表示。

- 使用者切替
2人×84回分の測定値を別々に記録。また、「記録しない」を選択するとその測定結果は記録されず、ゲストモードとしてご使用いただけます。



- 経済的なACアダプタ付き